

# Hauptkatalog

The image features a minimalist design with a white background. A large, light grey geometric shape, resembling a stylized 'Z' or a series of connected triangles, is positioned on the left and bottom. The top right corner is also filled with a light grey shape, creating a sense of depth and modernity. The text 'Hauptkatalog' is prominently displayed in the upper left quadrant.

# **OMS**

## **Your Dental Unitness**

60 Jahre Geschichte des „Made in Italy“ im Dienste von Zahnärzten und ihrer Teams. Hochwertige Materialien, Design und Ergonomie: OMS kombiniert die Solidität eines Industriezweigs mit der Vielseitigkeit eines Ateliers und schafft so maßgeschneiderte Behandlungseinheiten, die funktionell und farblich auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Praxis abgestimmt sind. Ihre Einzigartigkeit, Ihre Behandlungseinheit: Ihre Dentaleinheit.



## Wählen Sie zuerst die Grundelemente.

Die Verbindung von Wassereinheit und Behandlungsstuhl ist das vorrangige und grundlegende Element einer Behandlungseinheit. Das Hauptkriterium bei der Auswahl der am besten auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis zugeschnittenen Lösung. Ausgehend von den drei Grundaufbauten, auf denen alle möglichen Konfigurationen basieren, können Sie sich Ihre individuelle Behandlungseinheit zusammenstellen. Schritt für Schritt, begleitet von der Erfahrung und dem Knowhow on OMS.



**1**

Wassereinheit  
In der Säule  
positionierte  
Wassereinheit  
und freitragender,  
hängender  
Behandlungsstuhl



**2**

Wassereinheit  
In der Säule  
positionierte  
Wassereinheit  
und bodenstehender  
Behandlungsstuhl



**3**

Mobile  
Wassereinheit,  
hängender,  
integrierter  
Behandlungsstuhl



**1**

**In der Säule positionierte Wassereinheit und freitragender, hängender Behandlungsstuhl**

Stabilität, Ergonomie, Hygiene. Der hängende Behandlungsstuhl bietet dem Zahnarzt mehr Bewegungsfreiheit und damit eine bessere Annäherung an den Patienten. Hieraus resultieren wiederum mehr Komfort und ein optimierter Behandlungsablauf. Zudem werden Reinigungs- und Hygienetätigkeiten in der Praxis erleichtert. Die in der Säule positionierte Wassereinheit garantiert Stabilität.



**2**

**In der Säule positionierte Wassereinheit und bodenstehender Behandlungsstuhl**

Absolute Stabilität für maximale Präzision. Die Eigenständigkeit der zwei Komponenten Wassereinheit und Behandlungsstuhl reduziert Vibrationen auf ein Minimum und macht diese Konfiguration zur idealen Lösung für die Anbringung von besonders bewegungsempfindlichen Instrumenten, wie z. B. das Mikroskop und die OP-Lampe mit Videokamera. Darüber hinaus machen die beiden Verbindungspunkte für die Auslaufrohre – unter der Säule oder unter dem Stuhl – die Installation der Behandlungseinheit noch komfortabler und passen sich den Bedürfnissen sowie Arbeitsgewohnheiten jeder Praxis an.



**3**

**Mobile Wassereinheit, hängender, integrierter Behandlungsstuhl**

Eine Konfiguration im Einklang mit der Arbeitsphilosophie der „italienischen Schule“. Der Zahnarzt kann das Gerät jederzeit in die Spülposition bringen, ohne den Stuhl absenken und die Behandlung unterbrechen zu müssen, denn es genügt, die Rückenlehne anzuheben: Ergonomie und Schnelligkeit gepaart mit erhöhtem Patientenkomfort und einer deutlichen Zeitersparnis für den Arzt.

## Organisieren Sie Ihre Instrumente.

Bei OMS können Sie wählen, wie Sie Ihre Instrumente entsprechend Ihren Arbeitsgewohnheiten und dem verfügbaren Platz handhaben möchten: mit dem in die Behandlungseinheit integrierten Arztelement, dem von der Decke hängenden sternförmigen Arztelement oder mit dem mobilen Kartwagen.



### All-in

In die Behandlungseinheit integriertes Arztelement, mit kinematischem System S.P.R.I.D.O. oder mit hängenden Instrumentenschläuchen (Drop)



### Star

Hängendes Arztelement



### Kart

Arztelement auf mobilem Wagen



## All-in

**In die Behandlungseinheit integriertes Arztelement, mit kinematischem System S.P.R.I.D.O. oder mit hängenden Instrumentenschläuchen (Drop)**


Bei dieser Lösung ist das Arztelement direkt mit der Behandlungseinheit verbunden. Die Instrumente können sowohl in der Konfiguration mit hängenden Instrumentenschläuchen (Drop) als auch in der S.P.R.I.D.O.-Konfiguration verwendet werden, je nach den Bedürfnissen der Praxis und den Wünschen des Zahnarztes.



## Star

**Hängendes Arztelement**

Wenn Sie sich für die Lösung mit dem von der Decke herabhängenden Arztelement entscheiden, sparen Sie mehr Arbeitsplatzfläche, erfüllen sowohl die Bedürfnisse des Rechts- als auch des Linkshänders und können alle Arten von Behandlungen problemlos durchführen. Das Arztelement Star berücksichtigt insbesondere die Psyche des Patienten, da dieser bei Betreten des Behandlungsraums zuerst den Stuhl und erst später die Instrumente sieht.

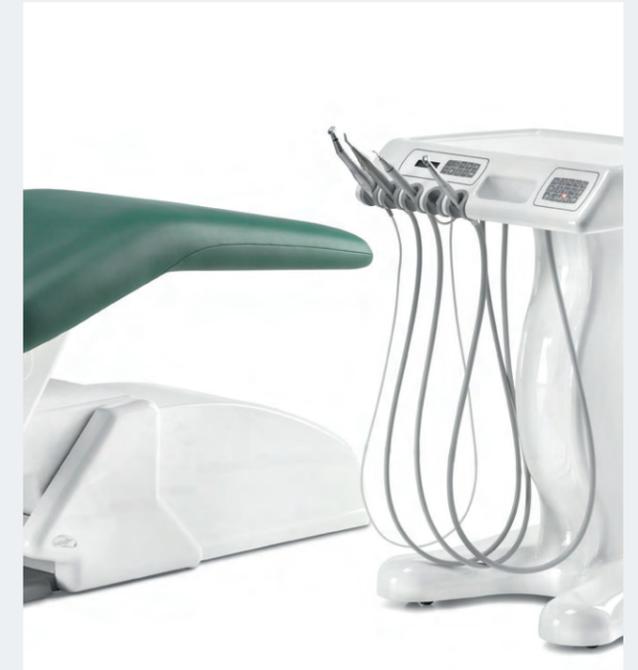

## Kart

**Arztelement auf mobilem Wagen**

Maximale Freiheit, einfache Reinigung der Praxis und Berücksichtigung der Psyche des Patienten. Sie können das Arztelement auf dem Kartwagen an jedem beliebigen Ort und zu jeder Zeit verwenden, den Platz vielseitig nutzen und die Instrumente außer Sichtweite des Patienten platzieren, wenn dieser zur Behandlungseinheit begleitet wird. Dank der großen Ablagefläche haben Sie während der gesamten Behandlungsdauer alle Instrumente griffbereit – von den grundlegenden Reinigungs- und Hygieneinstrumenten über den externen Mikromotor bis hin zu den für Implantate notwendigen Instrumenten. In einer Ecke positioniert, ermöglicht Ihnen der Kartwagen in kurzer Zeit und mit maximaler Leichtigkeit noch mehr Platz für erstmalige Patientenbesuche oder kosmetische Eingriffe.

## Denken Sie an Ihren Patienten.

Das kontinuierliche Erforschen der Ergonomie ist auch bei der Realisierung der mit der Dentaleinheit zu kombinierenden Behandlungsstühle das Leitmotiv für OMS. Die Modelle Moon, Arkadia und Swan mit ihrem jeweils eigenen, einzigartigen Design und einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten (farblich, aber auch in Bezug auf Rückenlehnen und Kopfstützen), entstehen aus dem Bewusstsein heraus, dass das Vertrauen und die Zufriedenheit des Patienten sowohl bei längeren Eingriffen als auch bei einfachen Kontrolluntersuchungen maßgeblich vom erlebten Komfort abhängen.



### Moon

Integrierter Behandlungsstuhl mit der Möglichkeit eines klappbaren Sitzes auf einer mobilen Plattform. Er kann mit in der Säule positionierten oder von der Decke hängenden Wassereinheiten kombiniert werden oder einzeln für Eingriffe verwendet werden, bei denen die Wassereinheit nicht benötigt wird. Ausgestattet mit einem im Sockel integrierten Anschlusskasten für die an die Wassereinheit angeschlossene Version.



### Arcadia EXT

Integrierter oder hängender Behandlungsstuhl, auf einer mobilen Plattform. Er kann mit in der Säule positionierten oder von der Decke hängenden Wassereinheiten kombiniert werden oder einzeln für Eingriffe verwendet werden, bei denen die Wassereinheit nicht benötigt wird. Ausgestattet mit einem im Sockel integrierten Anschlusskasten für die an die Wassereinheit angeschlossene Version.



### Swan

Integrierter Behandlungsstuhl mit klappbarem Sitz. Er kann mit in der Säule positionierten oder von der Decke hängenden Wassereinheiten kombiniert werden oder einzeln für Eingriffe verwendet werden, bei denen die Wassereinheit nicht benötigt wird.



## Moon

Extrem komfortabel, mit größtmöglicher Auswahl zwischen verschiedenen Rückenlehnen. Moon besticht durch große Stabilität. Dank des Stromabnehmers aus Aluminiumguss mit drei aus einem Stück geformten Teilen, ist er geräuscharm in der Bewegung und daher perfekt für Behandlungen und Eingriffe, die bis zu zwei Stunden dauern können. Sie können ihn mit sämtlichen Behandlungseinheiten kombinieren. Ideal für ältere Patienten und Kinder, die einen besseren Zugang benötigen. Als einziger Stuhl kann er bei ruhenden Patienten auf 90 Grad positioniert werden: Das ist vorteilhaft bei der Abdrucknahme – weniger störend für den Patienten und einfacher für den Bediener. Darüber hinaus verleiht er die Möglichkeit, mit dem Patienten auf Augenhöhe zu sprechen.



## Arcadia

Ein Klassiker von OMS, ein Behandlungsstuhl, der sich im Laufe der Zeit durch seine außergewöhnliche Zuverlässigkeit einen Namen gemacht hat. Arcadia hat eine Kastenstruktur und ist aus Eisen gefertigt, womit dem Wunsch nach dem in Bezug auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Zahnarztes besten Ausgangsmaterial Rechnung getragen wird: ein stilvolles, qualitativ hochwertiges Einsteigermodell „Made in Italy“ mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.



## Swan

Der selbsttragende Stuhl zeichnet sich durch eine sehr breite Rückenlehne und eine mögliche Höhenverstellung aus, wodurch er auch für sehr große, robuste Patienten geeignet ist. Durch seinen hohen Komfort ist er ideal für chirurgische Eingriffe. Dank seiner Vielseitigkeit ist er auch einzeln ohne Dentaleinheit, zum Beispiel in einem Arbeitsbereich für Schönheitsbehandlungen, einsetzbar.



## Welche Art von Behandlungen bieten Sie an?

Ihre Spezialisierung, Ihre berufliche Laufbahn, Ihre Erfahrung. Aus diesen Elementen schlagen wir Ihnen vor, sich zunächst den letzten, wichtigen Schritt in der Konfiguration der Behandlungseinheit vorzustellen: die Wahl der Anzahl und Art der Instrumente, mit denen sie ausgestattet werden soll, und das für eine bestmögliche Ausführung ihrer Arbeit grundlegende Zubehör. Ausgehend von diesen Faktoren vervollständigt OMS sein Angebot, das neben fortschrittlicher technologischer Ausstattung auch eine breites Angebot an Kopfteilen und Rückenlehnen umfasst.

Wie möchten Sie Ihre Praxis einrichten oder umgestalten? Was sind die Anforderungen und an welche Art von Spezialisierungen und Behandlungen denken Sie? Von der unverzichtbaren Grundkonfiguration für eine Behandlungseinheit im Rahmen eines erstmaligen Arztbesuches, über die für Mehrfachbehandlungen konzipierten Einheiten bis hin zu jenen für Kieferorthopädie, Endodontie, Ästhetik und Chirurgie bietet OMS Zahnärzten und ihren Teams die für ein optimiertes Arbeiten und maximalen Patientenkomfort erforderlichen Technologien und das notwendige Zubehör.

## Wie viele Instrumente möchten Sie auf dem Arztelement handhaben?



Die Behandlungseinheiten von OMS können mit zwei Grundkonfigurationen mit jeweils vier und fünf Gehäuseeinheiten ausgestattet werden: in einem Fall mit einer Spritze und drei Instrumenten Ihrer Wahl, in dem anderen mit einer Spritze und vier Instrumenten Ihrer Wahl.

## Wie möchten Sie die Kommandos steuern?



Unsere Arztelemente werden entweder nur mit Tastatur oder mit Tastatur und Display geliefert. Letzteres kann in der Standardversion oder im grafischen Modell in Farbe gewählt werden.

## Arbeiten Sie oft allein oder mit einer Assistentin?



Wenn Sie allein arbeiten, können Sie die Apparatur so konfigurieren, dass die Absaugung immer griffbereit ist. Wenn Sie häufiger mit einer Assistentin arbeiten, ist diese kompakte Konfiguration nicht erforderlich.

## Zusätzlicher Komfort für Ihre Assistentin?



Sie können das Arztelement wahlweise mit einem doppelten Aluminiumgehäuse für zwei zusätzliche Absaugschläuche neben dem Display ausstatten. Eine Option, die bei einem chirurgischen Eingriff den Unterschied macht.

## Kopfteil



Sie haben die Wahl zwischen dem Standardkopfteil, dem Doppelgelenk-Kopfteil (auch in der Klickversion) oder der 3D-Version: Diese zeichnet sich durch drei Bewegungen aus, wobei ein Teil des Behandlungsstuhls abgesenkt werden kann, um auch Kindern maximalen Komfort zu gewährleisten.

## Rückenlehne



Wenn Sie viel in der Kieferorthopädie arbeiten, wählen Sie die schmale Version, die einen hervorragenden frontalen Zugang garantiert. Für die Chirurgie gibt es hingegen eine besonders großzügige Rückenlehne, die auch sehr großen Patienten maximalen Komfort bietet.

## Sind Sie auf der Suche nach Ergonomie bis ins letzte Detail?



Der Modularm des Assistentinnenelements kann nach Ihren Bedürfnissen ausgewählt werden: Der pantographische Arm bietet noch mehr Komfort bei der Arbeit und ermöglicht es Ihnen, auch allein mit großer Bewegungsfreiheit zu arbeiten.

## Und der Fußanlasser?



OMS bietet ihn sowohl in der Standardversion als auch in der noch komfortableren WLAN-Version an.



## Ein komplettes Sortiment, maßgeschneiderte Lösungen.

Die Art und Weise wie OMS mit seiner 60-jährigen Erfahrung die Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten für Zahnärzte und ihr Team entwickelt, veranlasste uns, die bereits breite Produktpalette mit anderen Augen zu betrachten. Tatsächlich stehen die einzelnen Modellen nicht nur für eine Behandlungseinheit, die Sie aufgrund ihrer bereits außergewöhnlichen Qualitäten und Eigenschaften auswählen können, sondern sind auch ein Beispiel und Ausgangspunkt, von dem ausgehend Sie sich Ihre Behandlungseinheit ganz nach Ihren Bedürfnissen ausmalen können. Ausgehend von den Grundelementen finden Sie die für Sie passende Behandlungseinheit oder lassen Sie sich inspirieren und fragen Sie uns nach einer individuellen Konfiguration.

# Universal Double Face Top

Aus der kontinuierlichen Forschung von OMS entstand eine Dentaleinheit, die eine auf nur wenigen einfachen Handgriffen basierende, extrem einfache Umstellung von der Konfiguration für Rechtshänder auf die für Linkshänder ermöglicht. In Bezug auf die Funktionen und das Material verfügt sie über dieselben Qualitätsmerkmale wie die Universal Top (in die Säule integrierte Wassereinheit, freitragender Behandlungsstuhl, komplette Ausstattung (das Arztelement nimmt bis zu fünf Instrumente auf), kinematisches System S.P.R.I.D.O. für eine geringe Schwingbügelhöhe, Auflage der Wassereinheit aus Edelstahl) mit dem Vorteil, dass sie .... zwei „Gesichter“ (Double Face) hat.



+ Einfacher Wechsel von der Rechts- zur Linkshänder-Konfiguration

+ Frontposition mit 90-Grad-Sitz, für den Dialog mit dem Patienten

+ Aufbau, der eine große Bewegungsfreiheit ermöglicht



+ Ergonomisches Arztelement mit fünf Instrumenten und einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche



Wassereinheit in der Säule mit hängendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Moon



Das Spitzenmodell für Rechts- und Linkshänder

# Universal Top

Die technologische und lineare Behandlungseinheit mit Säuleneinheit und freitragendem, äußerst komfortablem sowie flexiblem Behandlungsstuhl. Das Flaggschiff von OMS, das in der Lage ist, auf alle Bedürfnisse des Zahnarztes und seines Teams bestmöglich einzugehen, Universal Top ist mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringe Schwingbügelhöhe ausgestattet und zeichnet sich durch seine vollständige Ausstattung aus. Das Arztelement kann bis zu fünf Instrumente aufnehmen.




+ Kinematisches System S.P.R.I.D.O. mit geringerer Schwingbügelhöhe.

+ Ergonomisches Arztelement mit bürstenlosem Mikromotor und intuitiver grafischer Benutzeroberfläche



+ Ausgelegt für zwei Absaugschläuche und einen freien Köcher

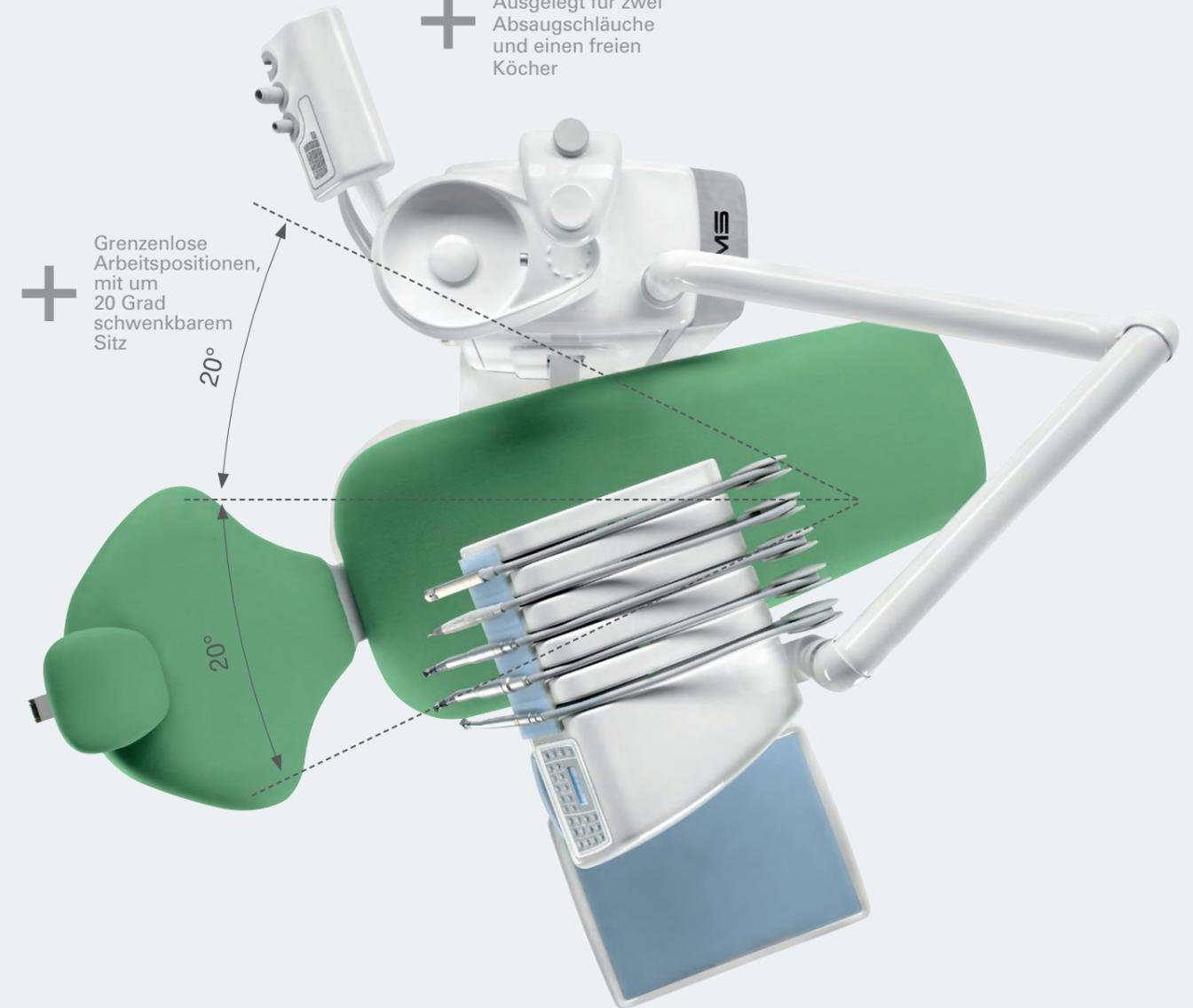

+ Grenzenlose Arbeitspositionen, mit um 20 Grad schwenkbarem Sitz

+ Aufbau, der eine maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht



 Wassereinheit in der Säule mit hängendem Behandlungsstuhl

 Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.

 Behandlungsstuhl Moon

+ Alles, was Sie von einer Behandlungseinheit erwarten können.

# Universal Top mit klappbarem Behandlungsstuhl

Das Flaggschiff aus dem Hause OMS mit in der Säule positionierter Wassereinheit ist auch mit klapp- und um 20 Grad drehbarem Behandlungsstuhl erhältlich: eine Konfiguration, die sich besonders für Prothesen und die Endodontie eignet und sehr komfortabel für ältere Patienten sowie Kinder ist. Die klappbare Einheit Universal Top erfüllt bestens alle Anforderungen des Zahnarztes und seines Teams: Ausgestattet mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe besticht sie durch ihre vollständige Ausstattung. Das Arztelement kann bis zu fünf Instrumente aufnehmen.



+ Auch als Linkshänder-Version erhältlich



+ Kinematisches System S.P.R.I.D.O. mit geringer Schwingbügelhöhe



+ Klappbarer Behandlungsstuhl



Wassereinheit in der Säule mit hängendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Klappbarer Behandlungsstuhl Moon



Das Top-Modell der Serie mit klappbarem Behandlungsstuhl

# Universal Drop

Das Flaggschiff von OMS mit in der Säule positionierter Wassereinheit und dem äußerst komfortablen, flexiblen, freitragenden Behandlungsstuhl ist auch in der Drop-Ausführung mit abnehmbaren, hängenden Instrumentenschläuchen erhältlich: Das Arztelement ist vollständig aus Keramik gefertigt, hat eine große Auflagefläche und kann bis zu fünf Instrumente aufnehmen. Eine Komplettausstattung, die alle Anforderungen des Zahnarztes und seines Teams optimal erfüllt.



-  Wassereinheit in der Säule mit hängendem Behandlungsstuhl
-  Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen
-  Klappbarer Behandlungsstuhl Moon
-  Das Spitzenmodell, in der Ausführung mit hängenden

# Universal Kart

Das Flaggschiff von OMS mit in der Säule positionierter Wassereinheit und dem äußerst komfortablen, flexiblen, freitragenden Behandlungsstuhl ist auch in der Kart-Ausführung erhältlich: Der mobile Wagen aus Aluminiumguss mit einem vollkeramischen Arztelement kann bis zu fünf Instrumente aufnehmen. Eine Konfiguration, die große Freiheit und eine Komplettausstattung bietet, die allen Bedürfnissen des Zahnarztes und seines Teams bestens gerecht wird.



-  Wassereinheit in der Säule mit hängendem Behandlungsstuhl
-  Arztelement auf mobilem Wagen
-  Klappbarer Behandlungsstuhl Moon
-  Spitzenmodell mit dem Arztelement auf einem mobilen Wagen

# Universal ML

Universal ML ist die weltweit erste Dentaleinheit mit integriertem Mikroskop und zeichnet sich durch modernste Technologie gepaart mit einer Komplettausstattung aus. Mit der in der Säule positionierten Wassereinheit und einem bodenstehenden Behandlungsstuhl ist sie mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe ausgestattet. Das Arztelement kann fünf Instrumente aufnehmen und ist mit symmetrischen Steuerungen für eine doppelte Bedienbarkeit durch Arzt und Assistentin ausgestattet.



+ Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche



+ Pantografisches Assistentinnenelement mit großem Bewegungsspielraum



In der Säule positionierte Wassereinheit mit bodenstehendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Moon



Die Weltneuheit mit integriertem Mikroskop



Standardausführung, 45 Grad/60 Grad geneigter Okularhalter



Ausführung mit digitalem Videosystem, kippbarer Okularhalter 0 Grad/210 Grad

# Universal Star

Das Arztelement und die OP-Leuchte sind hängend und verstellbar, um eine optimale Ergonomie und maximale Bewegungsfreiheit während der Behandlung zu gewährleisten und den Raum vor, während sowie nach dem Eingriff flexibel zu gestalten. Universal Star ist mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe ausgestattet.



Arztelement Star hängend mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Moon



Maximale Ergonomie, minimalster Platzbedarf

## Universal Star mit Wassereinheit Universal Top

Ergonomische und flexible Behandlungseinheit, in der Säule positionierte Wassereinheit und bodenstehender Behandlungsstuhl. Universal Star zeichnet sich durch ein oberhalb des Behandlungsstuhls hängendes leicht verstellbares Arztelement mit ebenfalls verstellbarer OP-Leuchte aus. Eine einzigartige und besonders effiziente Lösung, die maximale Ergonomie und große Bewegungsfreiheit garantiert. Universal Star ist mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe ausgestattet.



Wassereinheit in der Säule mit hängendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Moon



Massima ergonomia, minimo ingombro

## Universal Star mit der Wassereinheit Carving

Die jeweils hängende und verstellbare Konfiguration von Arztelement und OP-Lampe bietet eine großartige Freiheit und spiegelt die geschwungenen Linien von Carving mit seiner mobilen Wassereinheit und dem integrierten Behandlungsstuhl wieder. Eine Konfiguration, die eine hervorragende Ergonomie und maximale Bewegungsfreiheit während der Behandlung gewährleistet und es Ihnen ermöglicht, den Raum vor, während und nach dem Eingriff flexibel zu gestalten. Universal Star ist mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe ausgestattet.



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.




Behandlungsstuhl Moon



Maximale Ergonomie, minimalster Platzbedarf

# Carving Plus Moon

Carving Plus Moon ist das Resultat aus der Kombination des kurvenreichen Designs von Carving, der weltweit ersten Dentaleinheit mit geschwungenen Linien, und der Konfiguration mit einer in der Säule positionierten Wassereinheit. Sie ist sowohl mit System S.P.R.I.D.O. als auch mit hängenden Instrumentenschläuchen erhältlich und verfügt auf der Wassereinheit eine Ablage aus Edelstahl für noch mehr Widerstandsfähigkeit und Hygiene. Komfort, hochwertige Materialien und Spitzentechnologie: Die Spitzenqualität von OMS – made in Italy.

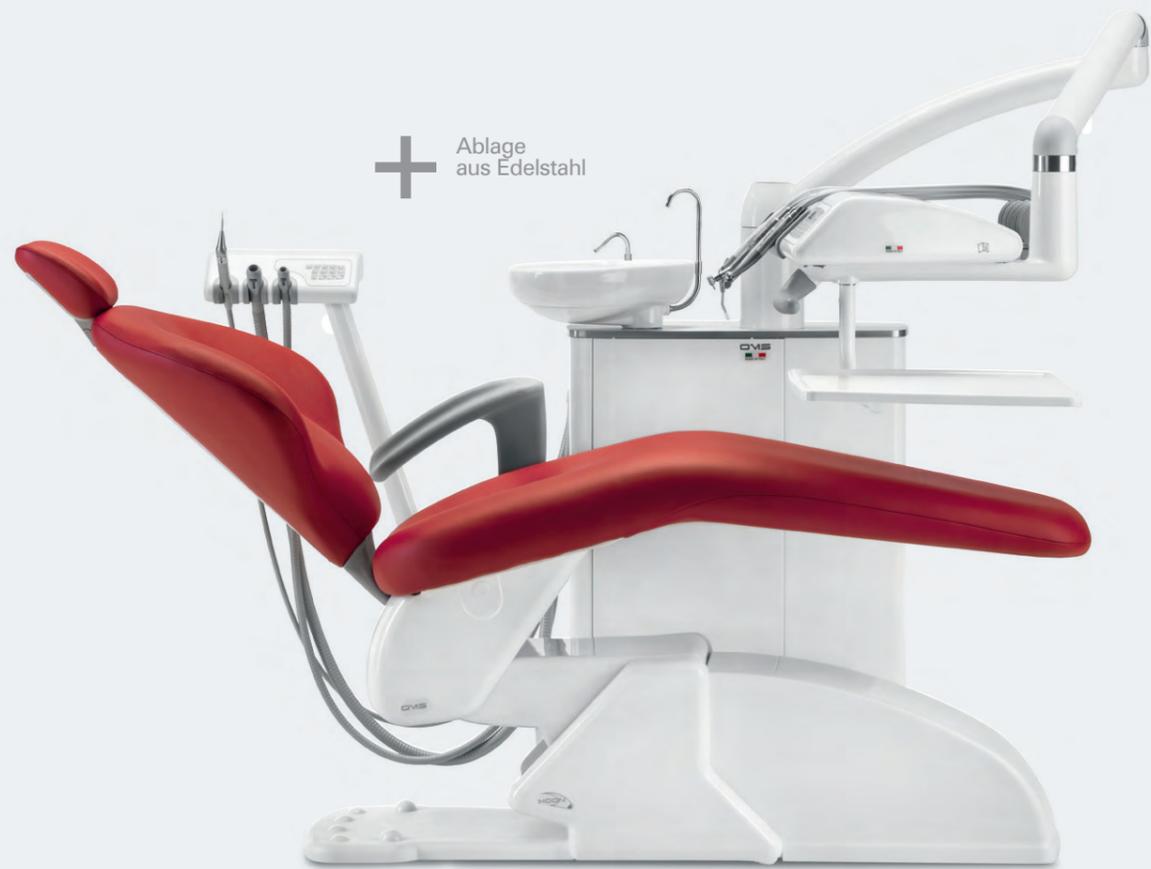

+ Ablage aus Edelstahl



In der Säule positionierte Wassereinheit mit bodenstehendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Moon



Die Entwicklung der weltweit ersten Behandlungseinheit mit geschwungenen Linien



+ Zum Patienten hin schwenkbares und entfernbares




+ Arztelement mit doppeltem Gelenkarm

+ Doppelte und einfache Ablagefläche



# Virtuosus Plus

Virtuosus ist als Dentaleinheit der Inbegriff für italienisches Design: Spitzentechnologie, großartige Ergonomie und Flexibilität in der Anwendung. In der Ausstattung Plus sind eine in der Säule positionierte Wassereinheit und ein bodenstehender Behandlungsstuhl vorgesehen. Ausgestattet mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe kann das Arztelement fünf Instrumente aufnehmen und zeichnet sich durch symmetrische Steuerungen für eine doppelte Bedienbarkeit durch Arzt und Assistentin aus.

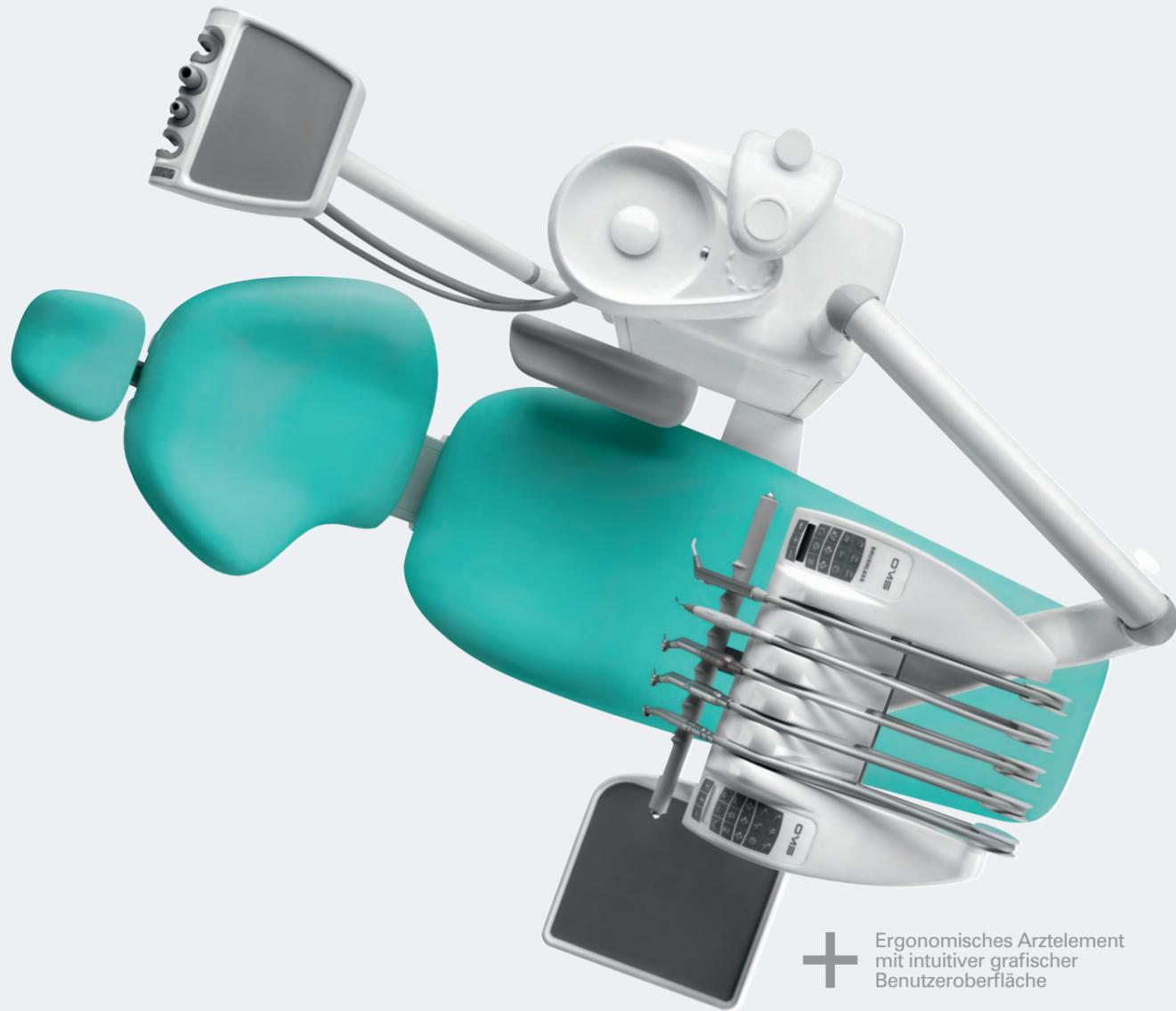

+ Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche



In der Säule positionierte Wassereinheit mit bodenstehendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Arcadia EXT



Großartige Ergonomie und Flexibilität



Ergonomisches Arztelement für fünf Instrumente, mit der Möglichkeit, zwei Module hinzuzufügen.



Kinematisches System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe



Ergonomisches Assistentenelement mit speziellen Bedienelementen und Ablagefläche mit geschützter Ablage.



# Patavium Plus

Mit in der Säule positionierten Wassereinheit und dem bodenstehenden Behandlungsstuhl ist Patavium Plus die natürliche Weiterentwicklung der Dentaleinheit Patavium, die im Laufe der Jahre zur Visitenkarte von OMS geworden ist. Sie zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, die Beachtung der Grundsätze der Ergonomie und eine umfassende Ausstattung aus. Das kinematische System S.P.R.I.D.O. garantiert eine geringere Schwingbügelhöhe, das Arztelement kann fünf Instrumente aufnehmen und ermöglicht die Hinzufügung von zwei zusätzlichen Modulen.



+ Ergonomisches Arztelement für fünf Instrumente, mit der Möglichkeit, zwei Module hinzuzufügen



 In der Säule positionierte Wassereinheit mit bodenstehendem Behandlungsstuhl

 Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.

 Behandlungsstuhl Arcadia EXT

+ Maximale Zuverlässigkeit, reichhaltige Ausstattung



+ Kinematisches System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe.

+ Griffabdeckung und Tray-Abdeckung sind entfernbar und autoklavierbar



Kombination Patavium mit dem Behandlungsstuhl Arcadia EXT

# Linea Esse Plus

Die weltbekannte Behandlungseinheit Linea Esse in der Plus-Version ist in der Konfiguration mit in der Säule positionierter Wassereinheit und einem bodenstehenden Behandlungsstuhl erhältlich. Das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis und die hohe Zuverlässigkeit werden durch eine durch den schwenkbaren, pantographisch gestalteten Absaugarm garantierte hervorragende Arbeitsergonomie ergänzt. Ausgestattet mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe kann das Arztelement vier Instrumente.



In der Säule positionierte Wassereinheit mit bodenstehendem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.




Behandlungsstuhl Arcadia EXT



Maximale Zuverlässigkeit, exzellente Ergonomie



Ausgelegt für zwei Absaugschläuche und einen freien Köcher.

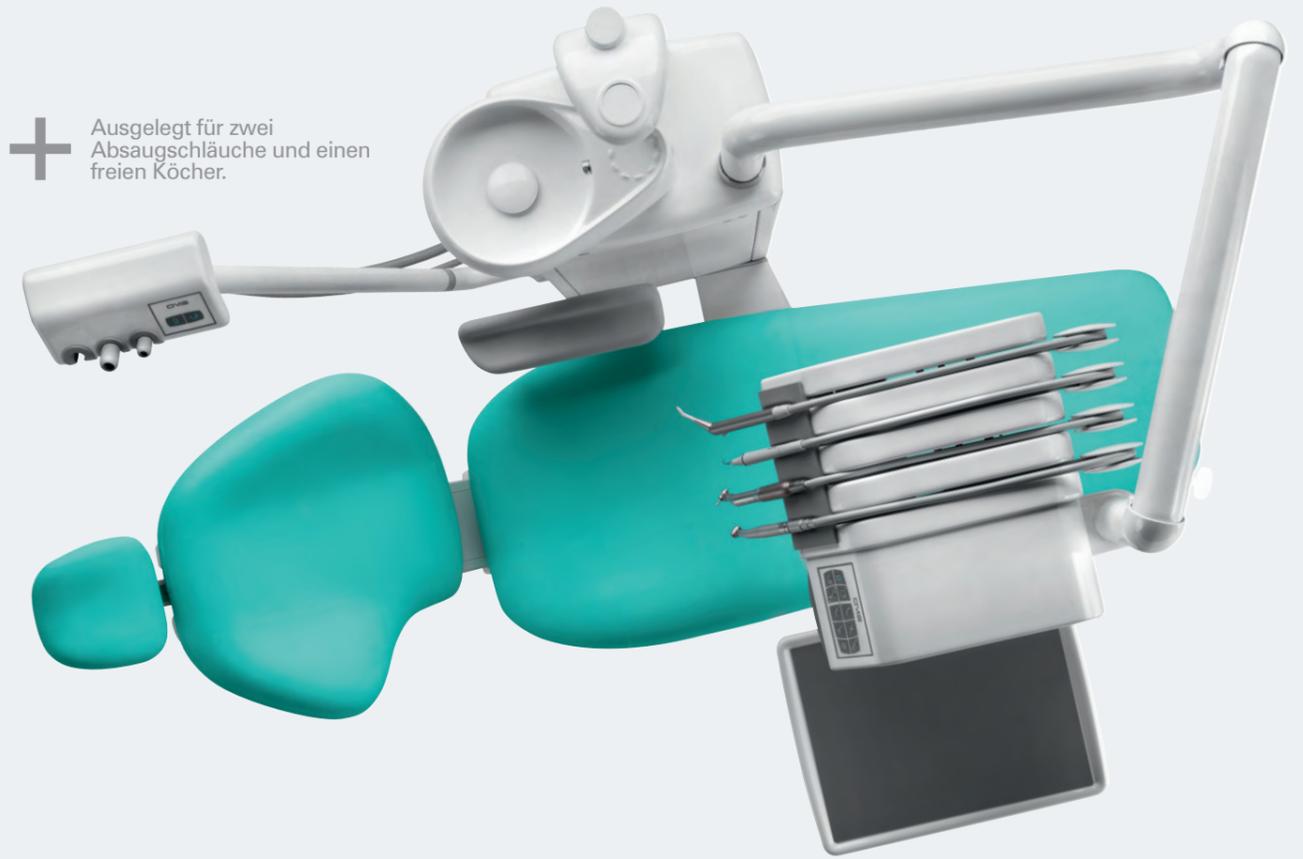

Ausgelegt für zwei Absaugschläuche und einen freien Köcher



Ergonomischer Widerstandsregler mit dynamischen Bewegungen der Instrumente und des Behandlungsstuhls



# Carving

Als weltweit erste Behandlungseinheit mit geschwungenen Linien garantiert sie höchsten Komfort, Flexibilität und Vielseitigkeit basierend auf einem weichen, ansprechenden Design im Einklang mit den Prinzipien der Ergonomie. Carving besteht aus einer mobilen Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl und hat eine kompakte Gesamterscheinung, die auch durch das kinematische System S.P.R.I.D.O. unterstrichen wird, das für eine geringere Schwingbühelhöhe sorgt. Das Arztelement kann bis zu fünf Instrumente aufnehmen.



+ Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche.



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Moon



Die weltweit erste Behandlungseinheit mit geschwungenen Linien



Zum Patienten hin schwenkbares und entfernbares

## Carving Drop

Alle Qualitätsmerkmale von Carving, in der Carving Drop-Version mit einem Arztelement aus Keramik, das fünf Instrumente mit Hängeschläuchen aufnehmen kann und eine große Auflagefläche hat, um alles griffbereit zu haben.



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen



Behandlungsstuhl Moon



Die weltweit erste Behandlungseinheit mit geschwungenen Linien und hängenden Instrumentenschläuchen

## Carving Kart

Carving ist auch in der Kart-Version mit dem Arztelement auf einem mobilen Wagen erhältlich. Hergestellt aus Aluminium und Keramik, bietet sie Platz für fünf Instrumente mit hängenden Schläuchen. Dies garantiert eine hervorragende Bedienung und große Bewegungsfreiheit sowie ein optimales Raummanagement vor, während und nach der Operation.



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement auf mobilem Wagen



Behandlungsstuhl Moon



Die weltweit erste Behandlungseinheit mit geschwungenen Linien und dem Arztelement auf einem Kartwagen 45

# Virtuosus Classic

Keine Behandlungseinheit verkörpert italienisches Design und Innovation besser als diese. Hängende Wassereinheit und integrierter Behandlungsstuhl, Virtuosus Classic besticht durch modernste Technologie sowie eine herausragende Ergonomie und Flexibilität in der Anwendung. Das kinematische System S.P.R.I.D.O. garantiert eine geringere Schwingbühelhöhe. Das Arztelement kann fünf Instrumente aufnehmen und ist mit symmetrischen Steuerungen für eine doppelte Bedienbarkeit durch Arzt und Assistentin ausgestattet.

+ Kinematisches System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbühelhöhe



+ Griffe entfernbar und autoklavierbar



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Arcadia EXT




Leistungsstarke Ausrüstung, große Kompaktheit

# Patavium

Patavium entwickelte sich mit ihrer mobilen Wassereinheit und ihrem integrierten Behandlungsstuhl im Laufe der Jahre weltweit zum Vorzeigemodell von OMS. Sie zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, die Beachtung der Grundsätze der Ergonomie und eine umfassende Ausstattung aus. Das kinematische System S.P.R.I.D.O. garantiert eine geringere Schwingbühelhöhe und das Arztelement kann fünf Instrumente aufnehmen, wobei zwei zusätzliche Module hinzugefügt werden können.



+ Ergonomisches Arztelement für fünf Instrumente, mit der Möglichkeit, zwei Module hinzuzufügen

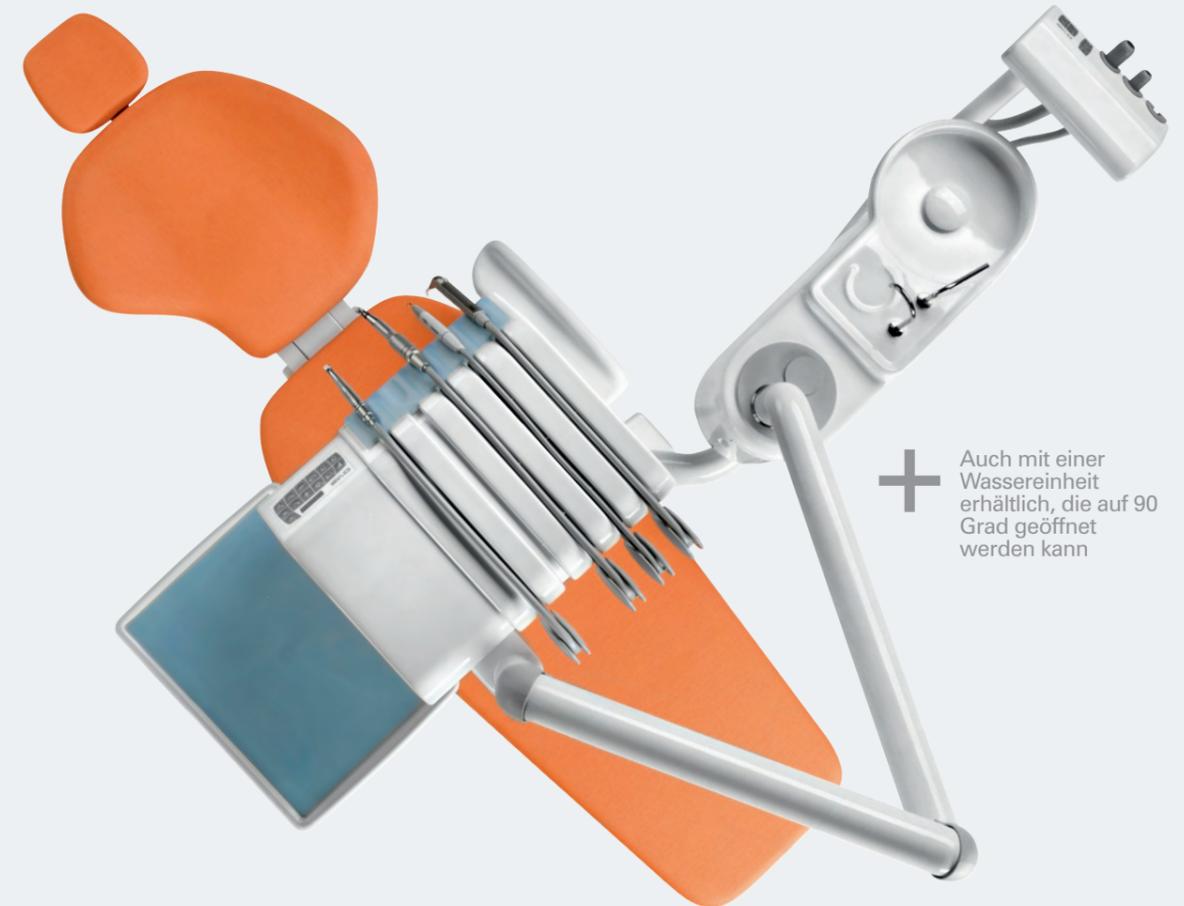

+ Auch mit einer Wassereinheit erhältlich, die auf 90 Grad geöffnet werden kann

+ Ausgelegt für zwei Absaugschläuche und einen freien Köcher.



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Arcadia EXT



Spitzenleistung zum besten Qualitäts-/Preisverhältnis

# Linea Esse

Die Behandlungseinheit Linea Esse mit mobiler Wassereinheit und integriertem Behandlungsstuhl genießt weltweit das Vertrauen von Zahnärzten. Sie ist essentiell, solide sowie äußerst zuverlässig und zeichnet sich durch die Kombination eines hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnisses mit jeglichen Grundsätzen der Ergonomie aus. Linea Esse ist mit dem kinematischen System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe ausgestattet und ihr Arztelement kann vier Instrumente aufnehmen.



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement All-in mit kinematischem System S.P.R.I.D.O.



Behandlungsstuhl Arcadia EXT




Das Einsteigermodell mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis



Ausgelegt für zwei Absaugschläuche und einen freien Köcher



Auch mit einer Wassereinheit erhältlich, die auf 90 Grad geöffnet werden kann.

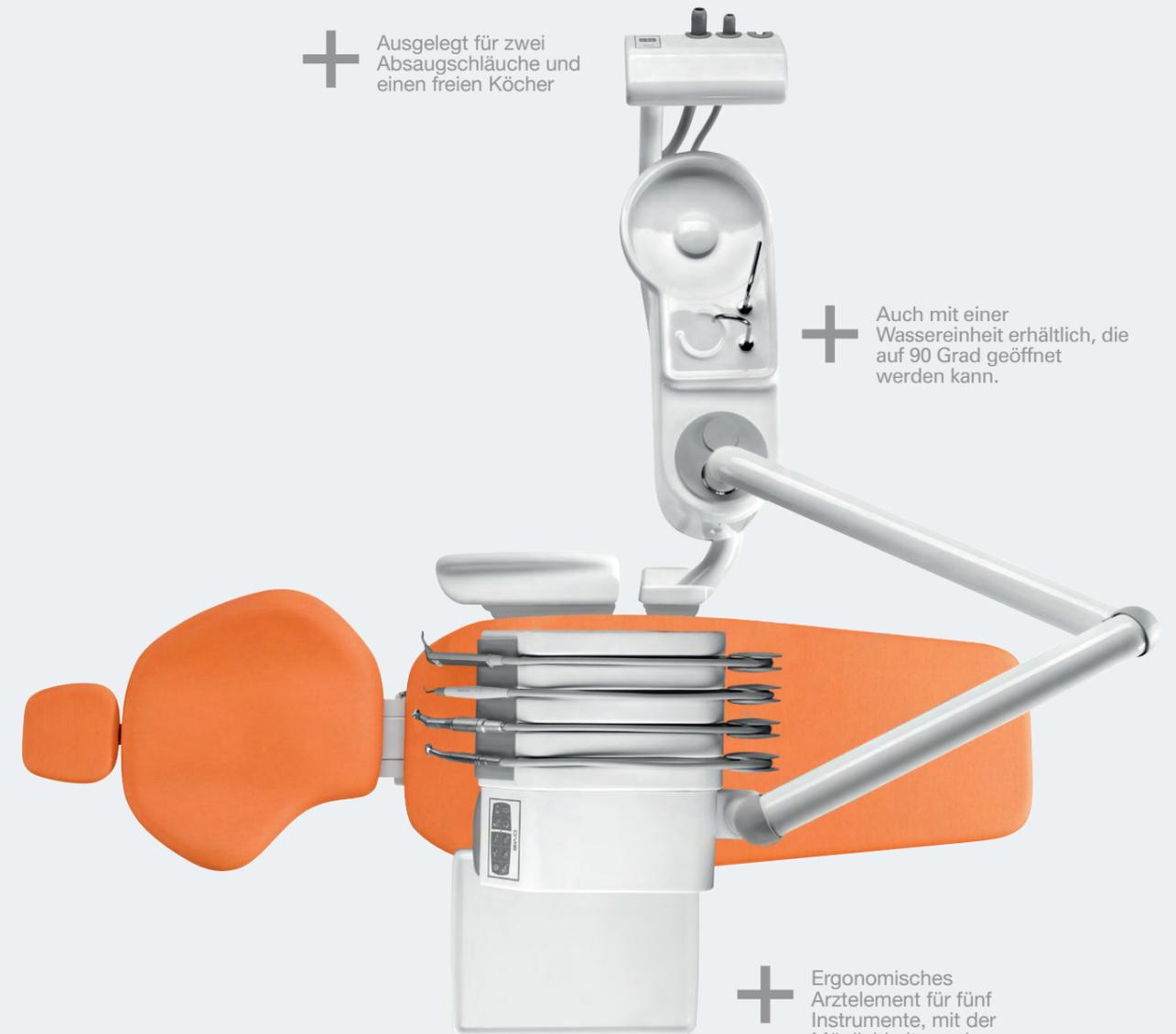

Ergonomisches Arztelement für fünf Instrumente, mit der Möglichkeit, zwei Module hinzuzufügen



Zwei Absaugschläuche und ein freier Köcher



Kinematisches System S.P.R.I.D.O. für eine geringere Schwingbügelhöhe




# Tempo 9 ELX

Mit ihrer mobilen Wassereinheit und dem integrierten Behandlungsstuhl überzeugt sie durch ihre alle Behandlungseinheiten von OMS auszeichnende hohe Zuverlässigkeit – basierend auf der Kombination von essentiellen Design mit erstklassigen Materialien. Tempo 9 ELX ist mit einem Arztelement aus Keramik ausgestattet, das bis zu vier Instrumente mit hängenden Schläuchen aufnehmen kann.

+ Höhenverstellbare Kopfstütze



+ Cordoni Pendenti

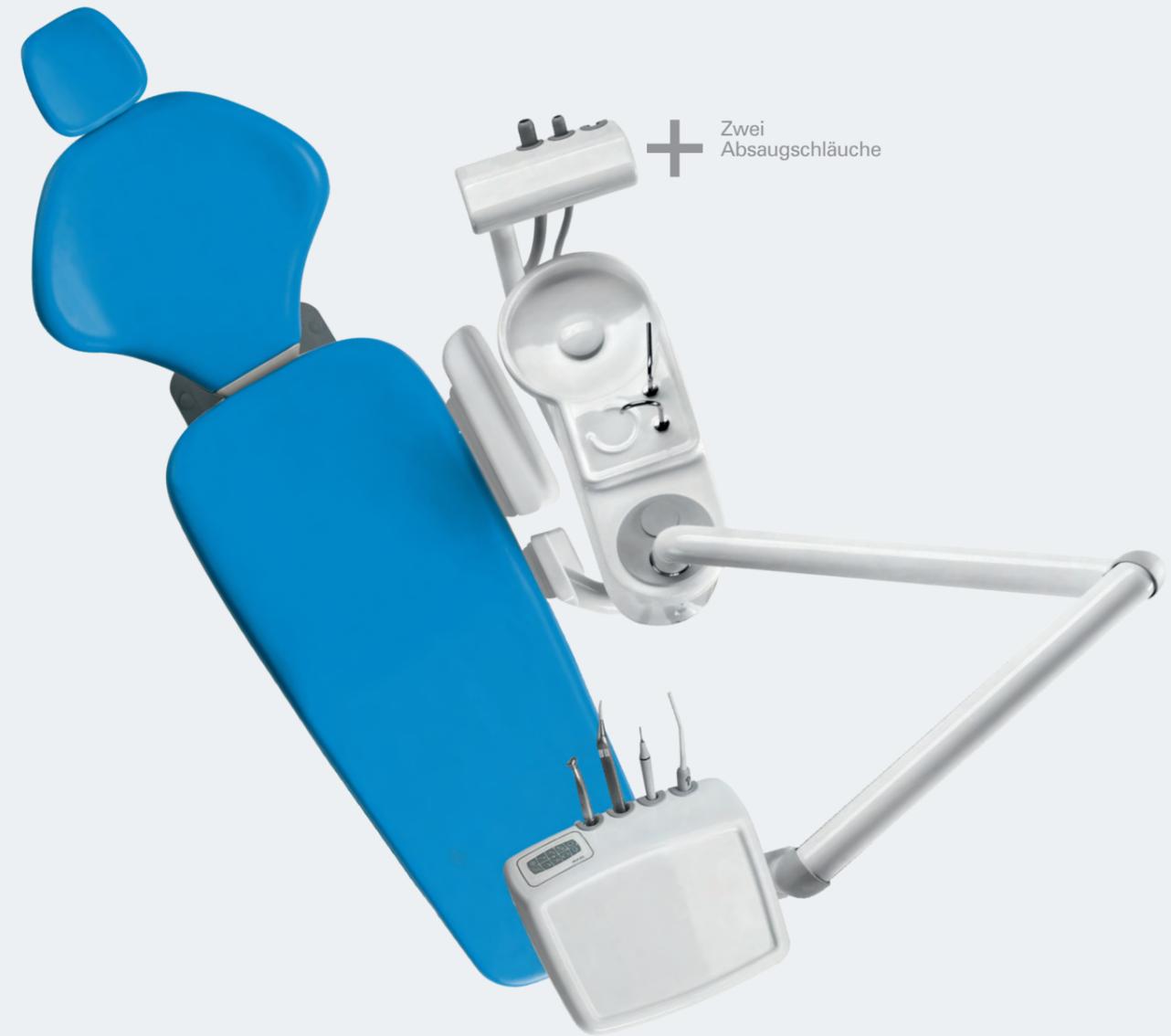

+ Zwei Absaugschläuche

+ Arztelement aus Keramik



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen



Behandlungsstuhl Arcadia EXT



Kompromisslose Zuverlässigkeit

## Tempo 9 ELX Kart

Tempo 9 ELX, die mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl ist auch in der Kart-Version erhältlich: Das Arztelement aus Keramik auf einem mobilen Wagen bietet Platz für bis zu vier Instrumente und besticht durch hervorragende Wendigkeit und große Bewegungsfreiheit.



+ Hängende Instrumentenschläuche



Mobile Wassereinheit mit integriertem Behandlungsstuhl



Arztelement auf mobilem Wagen



Behandlungsstuhl Arcadia EXT



Kompromisslose Zuverlässigkeit mit dem Arztelement fahrbarem Kart

## Punto Kart

Das Arztelement aus Keramik auf einem mobilen Wagen kann fünf Instrumente mit hängenden Schläuchen aufnehmen und bietet eine hervorragende Wendigkeit und große Bewegungsfreiheit



+ 5 Instrumente

+ Arztelement aus Keramik

+ Abnehmbare, hängende Instrumentenschläuche

+ Wagen aus Aluminiumguss



Arztelement auf mobilem Wagen



Bewegungsfreiheit

# Tempo Kart

Das Arztelement aus Keramik auf einem mobilen Wagen kann vier Instrumente mit hängenden Schläuchen aufnehmen und bietet eine hervorragende Wendigkeit und große Bewegungsfreiheit.



Arztelement  
auf mobilem  
Wagen



Bewegungsfreiheit