

Kompakt und Intelligent – Der neue Hygopac View

Sterilgutverpackung nach allen Regeln der Kunst – und den gesetzlichen Vorgaben



DRUCKLUFT
ABSAUGUNG
BILDGEBUNG
ZAHNERHALTUNG

HYGIENE
▪ INSTRUMENTE

Der kompakte Hygopac View – Schnelle Sterilgutverpackung, sicher und validierbar

Nie war Instrumentenverpackung so einfach und zuverlässig.

Bei jeder einzelnen Verpackung können Sie sicher sein, dass alle Vorgaben der Norm DIN EN ISO 11607-2 und die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) erfüllt sind.



Hygopac View im Überblick

- Außerordentlich kompaktes Design für einen minimalen Platzbedarf im Aufbereitungsraum
- Zuverlässig – dank hochwertiger Komponenten für einen wartungsfreien Betrieb
- Intuitives Bedienkonzept zur schnellen und einfachen Durchführung des Verpackungsprozesses
- Validierung leicht gemacht dank intelligentem und einfachem Validierungskonzept
- Hohe Flexibilität bei der Prozessdokumentation durch Speicherung auf SD-Karte und Netzwerkanbindung
- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung via Touch Display

Sterilgutverpackung als Beutel oder von der Rolle. Hygofol packt's:

Sparen Sie Zeit durch schnelle, normgerechte Verpackung und sparen Sie Kosten bei Rollenware – jetzt mit aufgedrucktem Lineal zum praktischen Ablängen. Mit oder ohne die flexibel einsetzbare Hygofol Station.



Versiegeln mit System.

Mit dem Zubehör und den Verpackungsfolien aus dem Hygopac System meistern Sie die Arbeit mit links. Der tägliche Siegelnahttest Hygopac Sealcheck ermöglicht die tägliche Kontrolle der Siegelnahtqualität auf einen Blick und bringt so ein zusätzliches Stück Sicherheit.



Instrumententisch und Hygofol Station zur Tischaufstellung



Hygofol Station wandhängend




Hygopac Sealcheck, täglicher Siegelnahttest

Der Hygopac View stellt die neue Generation des Durchlaufsiegelgerätes Hygopac Plus dar.

Mit seiner außerordentlich kompakten Bauweise vereint der Hygopac View modernes, funktionales Design mit einem intuitiven Bedienkonzept. Auf diese Weise wird der Verpackungsprozess bei der täglichen Wiederaufbereitung von Medizinprodukten einfach und schnell.



Überwachung durch VistaSoft Monitor

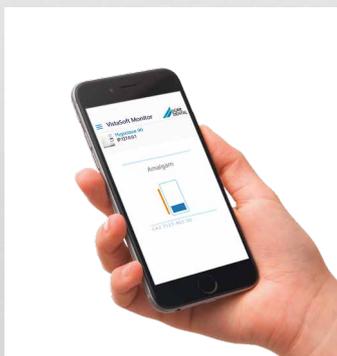

Software VistaSoft Monitor

- Überwachung des Gerätestatus via Netzwerk
- Automatische Protokollierung der durchgeführten Siegelvorgänge
- Erhöhte Betriebssicherheit
- Schnelle Hilfe im Servicefall

Hygopac

Durchlaufsiegelgerät für die Verpackung von Klarsichtsterilisierverpackungen



Hygopac View

Validierbares Durchlaufsiegelgerät gemäß DIN EN ISO 11607-2



| | Hygopac | Hygopac View |
|--|--------------------|---|
| Technische Daten | | |
| Spannung | 230 V | 230 V / 1 ~ |
| Netzfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Elektrische Leistung | 550 W | > 900 W |
| Heizleistung | 2 x 250 W | 2 x 400 W |
| Aufheizzeit | ca. 3 min | ca. 3 min |
| Siegeltemperatur | bis 240 °C | bis 210 °C |
| Temperatureinstellung | stufenlos | exakt in 5 °C-Schritten |
| Siegelgeschwindigkeit | 5,3 m/min | 3 Stufen wählbar (5 m/min, 7 m/min, 9 m/min) |
| Siegelnahtbreite | 9 mm | 13 mm |
| Gewicht | 7,2 kg | 7,8 kg |
| Abmessungen (H x B x T) | 160 x 435 x 135 mm | 170 x 370 x 140 mm |
| Zeitersparnis gegenüber Balkensiegelgeräten | ● | ● |
| Touchdisplay | | ● |
| Validierung | | |
| Automatische Prozessüberwachung (Siegeltemperatur, Siegelgeschwindigkeit, Anpressdruck) | | ● |
| Funktionsbeurteilung | ● | ● |
| Werkseitige Leistungsbeurteilung | ● | ● |
| Speicherung der Siegelparameter | | ● |
| Automatische Datenspeicherung per SD-Karte oder über Netzwerk | | ● |