

Einfach ein sicheres Gefühl. System-Hygiene von Dürr Dental.

4 Farben, 4 Bereiche – Einfach logisch, einfach sicher



DRUCKLUFT
ABSAUGUNG
BILDGEBUNG
ZAHNERHALTUNG
HYGIENE

Das Beste ist, wenn Sie sich auf ein System verlassen können

Bereits 1965 entwickelte Dürr Dental mit Orotol® das erste Desinfektionsmittel für Sauganlagen. Dies war der Startschuss für den kontinuierlichen Ausbau unserer Kompetenz im Hygienebereich. Heute vertrauen Zahnärzte weltweit auf die Dürr System-Hygiene, die Ihre Praxis umfassend schützt.

Neben den Produkten der Dürr System-Hygiene bieten wir Ihnen ein umfassendes Leistungspaket, das Ihr Praxisteam bei der täglichen Arbeit unterstützt. Unsere Beratung vor Ort steht Ihrem Team direkt zur Seite. Unser Service hilft Ihnen bei Fragen rund um unsere Produkte. Und beste Qualität durch jahrzehntelange Erfahrung wird beständig von Innovationen begleitet, die sich am Bedarf in der Praxis orientieren.


Beratung

- Fortbildungen, Teamschulungen und Beratung vor Ort
- Expertenwissen von qualifizierten Trainerinnen
- Lösungsorientierte Praxistipps individuell an Praxen angepasst
- Unterstützung beim Aufbau eines Qualitätsmanagement-Systems




Service

- Professionelle und lösungsorientierte Produktberatung
- Aktuelles Informationsangebot im Internet

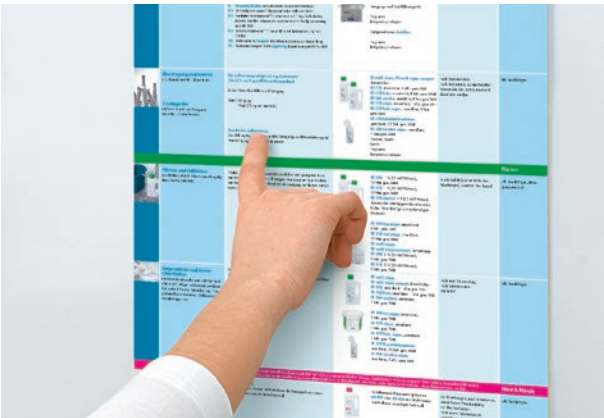

Dürr System-Hygiene

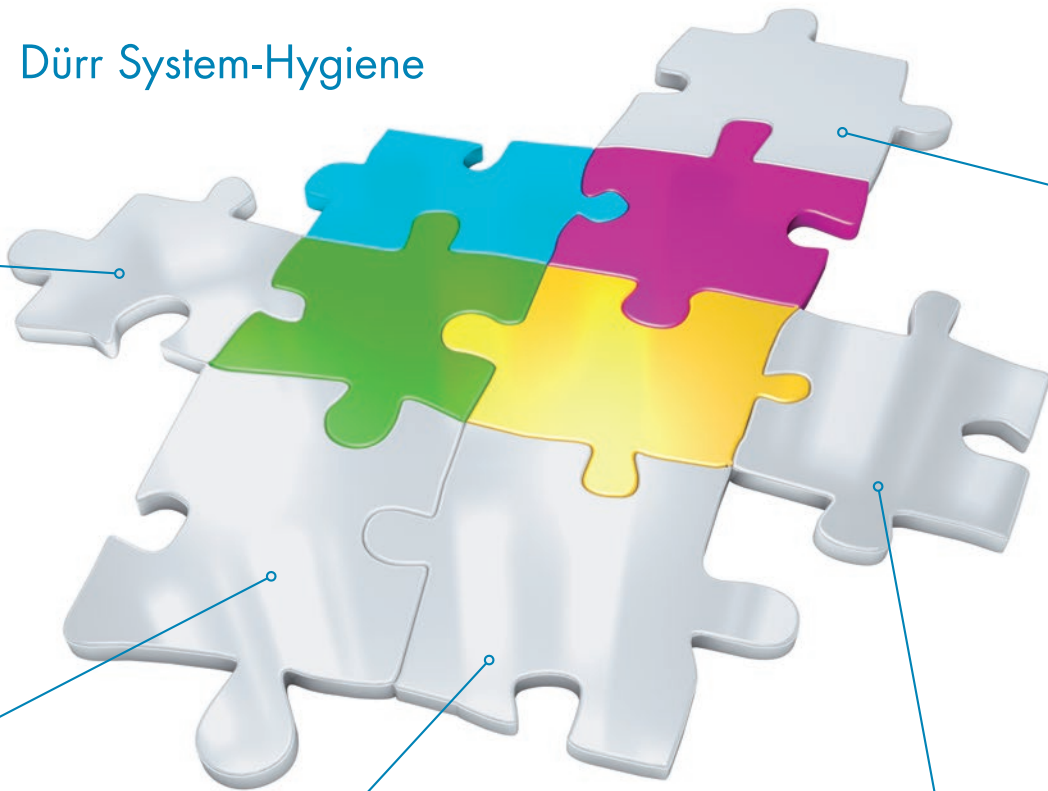

Anwenderorientierung

- Anwendungshilfe durch Dürr System-Hygiene Farbsystem
- Charakteristische und optimal lagerfähige 2,5 l-Flasche der Dürr System-Hygiene
- Einfaches Handling der Produkte durch ergonomische Flaschenform
- Applikationshilfen zur optimalen Dosierung



Qualität

- Hohe Produktionsstandards – Made in Germany
- Sicherheit durch definierte und kontrollierte Arbeitsprozesse
- Jahrzehntelange Erfahrung als Hersteller von Desinfektions- und Reinigungsmitteln



Hygienetechnik

- Mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik
- Unschlagbar: technische Lösungen in Kombination mit den Reinigungs- und Desinfektionslösungen von Dürr Dental
- Materialschonende und wirksame Produkte glänzen mit einfacher Handhabung und Schnelligkeit in der Anwendung



4 Farben – 4 Bereiche

- | | |
|----------------------------|----------|
| ■ Blau für Instrumente | Seite 06 |
| ■ Grün für Flächen | Seite 12 |
| ■ Rosa für Haut und Hände | Seite 16 |
| ■ Gelb für Spezialbereiche | Seite 18 |

Das Beste ist, wenn alles ein System hat

Bei Infektionsschutz, Desinfektion und Reinigung darf nichts dem Zufall überlassen werden. Aus diesem Grund haben wir mit zahlreichen Tests nachgewiesen, dass alle Präparate die Anforderungen erfüllen, die im Praxisalltag entscheidend sind.

Sicher

- Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid
- Geprüfte, zuverlässige Wirkung
- Ausnahmslos VAH-gelistet und EN-konform
- Hohe Desinfektions- und Reinigungskraft

Verträglich

- Überlegene Wirkstoffverbindung
- Besonders hautschonend und pflegend
- Äußerst materialverträglich, von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Klinisch erprobt
- Biologisch abbaubar

Komfortabel

- Einfach und effizient in der Handhabung
- Handliche, einheitliche Gebindegrößen
- Reinigung nach Plan
- Dosierung in Kappen
- Hochwirtschaftlich in der Anwendung

Schnell

- Kurze Einwirkzeiten
- Schnelles, rückstandsfreies Auftrocknen
- Praktische Anwendung
- Einfache Dosierung

Unsere Empfehlung für Ihre Praxis:

HD 410
Hände-Desinfektion

HD 435
Waschlotion

FD 366 sensitive
Desinfektion empfindlicher Oberflächen

FD 360
Kunstlederreinigung und -pflege

FD 366 sensitive wipes

FD 322
Schnelldesinfektion

FD 333 wipes
Desinfektionstücher

MD 550
Mundspülbecken-Reiniger

MD 555 cleaner
Spezialreiniger für Sauganlagen

Orotol® plus
Sauganlagen-Desinfektion

ID 212 oder ID 213
Instrumenten-Desinfektion

ID 220
Bohrer-Desinfektion

Dürr Dental Hygienetechnik – für maximale Effizienz im Hygienekreislauf

Seit über 75 Jahren steht Dürr Dental für richtungsweisende Entwicklungen in der Medizintechnik – Made in Germany. Mit diesem Anspruch und dem Ziel, unser Angebotsspektrum in der Hygienetechnik systematisch zu perfektionieren, können wir heute eine Vielzahl von innovativen,

technischen Systemlösungen anbieten, mit welchen die täglichen Hygiene- und Aufbereitungsmaßnahmen in der Zahnarztpraxis höchst effizient und mit bestem Ergebnis durchgeführt werden können. Im Zusammenspiel mit der Dürr System-Hygiene steht so ein unschlagbares Team zur Verfügung.

- Einsatz
- Manuelle Reinigung und Desinfektion
- Maschinelle Aufbereitung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Funktionsprüfung / Kontrolle und Instrumentenpflege
- Sterilgut-Verpackung mit Hygopac Plus und Hygofol
- Dampfsterilisation im Hygoclave 90
- Dokumentation
- Lagerung



Desinfektion und Reinigung
Instrumente und Bohrer

ID 212 Instrumenten-Desinfektion

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten mit bester Materialverträglichkeit



Standzeit
7 Tage

- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, begrenzt viruzid PLUS
- Geeignet für allgemeines, chirurgisches und rotierendes Instrumentarium
- Besonders kurze Einwirkzeit im Tauchbad
- Exzellente Materialverträglichkeit bei Instrumenten mit Gummi-/Silikonanteil

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: Hygasonic, Hygobox

ID 212 forte Instrumenten-Desinfektion

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten bei kurzer Einwirkzeit im Ultraschallbad



Standzeit
7 Tage

- Bakterizid inkl. Tb, levurozid, begrenzt viruzid PLUS
- Geeignet für allgemeines, chirurgisches und rotierendes Instrumentarium
- Hoher Korrosionsschutz und lange Standzeit von 7 Tagen
- Äußerst schnelle Desinfektion und Reinigung im Ultraschallbad

Wirkstoffe: Alkylamine, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: Hygasonic, Hygobox

ID 213 Instrumenten-Desinfektion

Voll viruzides Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von allgemeinen, chirurgischen und rotierenden Instrumenten



Voll
viruzid

- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach EN 14476)
- Außerordentliche Reinigungswirkung – löst hartnäckigste Verschmutzungen
- Besonders wirtschaftlich durch lange Standzeit von 14 Tagen
- Hervorragende Materialverträglichkeit durch Korrosionsinhibitoren

Wirkstoffe: Alkylamine, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: Hygasonic, Hygobox

ID 215 Enzymatischer
Instrumenten-Reiniger

Konzentrat zur manuellen, enzymatischen Reinigung von Instrumenten vor der Desinfektion



- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- Schützt das Personal aufgrund mikrobizider Wirkung
- Außerordentliche Reinigungswirkung – löst hartnäckigste Verschmutzungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen, Guanidinverbindungen
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: Hygasonic, Hygobox, Fräsator

ID 220 Bohrer-Desinfektion

Voll viruzide, gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion rotierender Instrumente



Voll
viruzid

- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach DVV/RKI und EN 14476)
- Hohe Reinigungskraft speziell für die Feinstrukturen von Bohrern und Fräsen
- Hoher Korrosionsschutz und lange Standzeit von 7 Tagen
- Sehr kurze Einwirkzeiten

Wirkstoffe: Alkohole im alkalischen Milieu
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: Hygasonic, Fräsator



Geräte und Zubehör

Hygobox

Robuste, widerstandsfähige Transport- und Desinfektions-Box mit 3 Liter Fassungsvermögen



- Ergonomisch geformte Tragegriffe für sicheren Transport
- Kippsichere Abtropfposition für den integrierten Siebeinsatz
- Kein Verhaken der Instrumente durch speziell geformte Lochschlitze

Maße (HxBxT): 13 x 32,5 x 21 cm
Farbvarianten: Anthrazitfarbener Deckel mit blauem oder gelbem Siebeinsatz, Deckel in 5 verschiedenen Farben mit weißem Siebeinsatz erhältlich
Unsere Empfehlung: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535

Hygasonic

Beheizbares Ultraschallgerät für die gründliche Reinigung von Instrumenten, Hilfsmitteln, Prothesen etc. Zudem kann das Instrumentarium durch Einsatz der ID-/MD-Produkte sicher desinfiziert werden



- Effektive und materialschonende Desinfektion und Reinigung
- Gleichmäßige Reinigung durch Schallfeldoptimierung
- Leistungssteigerung durch "Boost-Funktion"
- Entgasung von Lösungen durch "Degas-Funktion"

Maße (HxBxT): 21,4 x 30 x 17,9 cm
Wannenvolumen: 2,75 Liter
Zubehör: Deckel, Glasset, Einsatz-/Tauchkorb
Unsere Empfehlung: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, ID 220, MD 530, MD 535

Hygopac

Durchlaufsiegelgerät für die Verpackung von Klarsichtsterilisierverpackungen



- Optimaler Anpressdruck für gleichbleibende Siegelnaht-Qualität
- Fließbandprinzip für schnelles und rationelles Arbeiten
- Stufenlose Temperaturregulierung für die optimale Siegelnaht

Maße (HxBxT): 16,0 x 43,5 x 13,5 cm
Unsere Empfehlung: Hygofol Beutel, Hygofol Rollen

Hygopac Plus

Validierbares Durchlaufsiegelgerät für die normgerechte Versiegelung von Sterilisierverpackungen wie Hygofol



- Intelligentes Validierungskonzept nach DIN EN ISO 11607
- Datenspeicherung über SD Karte oder Netzwerk
- Hohe Siegelgeschwindigkeit

Maße (HxBxT): 17,0 x 37,0 x 14,0 cm
Unsere Empfehlung: Hygofol Beutel, Hygofol Rollen, Instrumententisch, Hygofol Station

Hygofol

Die Sterilisierverpackung Hygofol bietet mit ihrer Mehrschicht-Laminatfolie und besonders reißfestem Sterilisationspapier höchste Sicherheit



- Hohe Durchstoßfestigkeit und hervorragende mechanische Festigkeit
- Hohe Zugfestigkeit der Siegelnaht
- Hygofol als praktische, vorgefertigte Beutelware in 3 Größen
- Hygofol zur individuellen Konfektionierung als Rollenware in 5 Größen

Maße:
Hygofol Beutel (BxL): 7,5 cm, 10 cm oder 15 cm x jeweils 30 cm
Hygofol Rollen (BxL): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm oder 25 cm x jeweils 100 m



Geräte und Zubehör

■ Hygoclave 90

Klasse B Dampfsterilisator nach EN 13060 mit innovativer DuraSteam Technologie. Entscheidende Merkmale des Hygoclave 90 sind die Zuverlässigkeit und beeindruckend schnelle Zykluszeiten bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz. Erreicht wird dies durch die perfekte Kombination und das störungsfreie Zusammenspiel aus Dampfkondensator, Drei-Kolben-Vakuumpumpe,

Heatpipe, aufgeschweißten Ventilsitzen und starken 2400 Watt Heizleistung. Addiert man dazu seinen außergewöhnlichen Bedienungs- und Wartungskomfort, sowie die komplette Edelstahlbauweise für einen optimalen Werterhalt des Instrumentariums, ist er der Wegweiser einer neuen Leistungs-Ära.



- Schnellster Sterilisationszyklus (Universal-Programm 134 °C/5,5 Min. ab 12 Min.)
- Geringer Wasser- und Energieverbrauch
- Große Beladungskapazität (bis zu 10 kg bei der Verwendung von Sterilcontainern)
- Hohe Sterilisationssicherheit, durch tiefes und schnell erzeugtes Vakuum (große Kondensationsgeschwindigkeit)
- Freigabe inkl. aller relevanten Parameter direkt am Gerät durch Unterschrift
- Direkte Speicherung der Protokolle als PDF ohne PC-Anbindung möglich
- Anbindung an Tyscor Pulse und Drittanbieter
- Einfache und schnelle Wartung
- Der Träger kann mit bis zu 6 Tablettts oder – um 90° gedreht – 2 Norm-Tray-Kassetten und 1 Sterilcontainer (Höhe 65 mm) bestückt werden

Maße (HxBxT): 47,5 x 54 x 52 cm



■ Hygotest

Helix-Prüfkörper mit 250 Teststreifen für einen regelmäßigen, schnellen und einfachen Helix-Test.



- Nach EN 867-5 und ISO 11140-1
- PCD (Process Challenge Device) und 250 Indikatoren
- Als Chargenkontrollsystem und Bowie-Dick-Test verwendbar
- Starter-Set mit 50 Indikatoren bei Erstauslieferung des Autoklaven inklusive

■ Hygoprint Plus

Automatischer Etikettendrucker für Sterilgutverpackungen ermöglicht direkte Ausdrücke von programmspezifischen Etiketten.



- Flexibel platzierbar dank Ethernet-Anbindung
- Etikettengröße nach Richtlinien – Anbringung außerhalb der Siegelnaht möglich
- Barcode zum Einscannen in digitale Datenverwaltung
- Etikett-Angaben: Gerät (REF und SN), Programm, LOT-Datum, Benutzer (Freigabe durch), Verfallsdatum

Maße (HxBxT): 17,5 x 12,5 x 24 cm

Unsere Empfehlung: Hygoprint Plus Etiketten und Tonerrollen

■ Hygoprint

System zur Kennzeichnung von Sterilgutverpackungen.



- Schnelle und einfache Dokumentation des Sterilisationsprozesses
- Lückenlose Kennzeichnung mit allen relevanten Daten
- Besonders leicht und handlich

Unsere Empfehlung: einfach oder doppelt klebende Etiketten, Dokumentationsblock à 100 Blatt, Ersatzfarbrolle

■ Hygodem 90

Die Hygodem 90 steht für hohe Qualität, komprimiert in einem kompakten Gerät. Die Ionenaustauschanlage bereitet Leitungswasser in drei Kartuschen auf und kann auf kleinstem Raum direkt an den Hygoclave 90 angebunden werden.



- Ionenaustauschanlage
- Komfortabel durch 3 Ionenaustauscherkartuschen
- Einfache Wartung durch Druckentlastungsventil
- Einfache Montage durch Schnellverbinder
- Geringer Platzbedarf
- Günstiger Anschaffungspreis

Unsere Empfehlung: Kartuschenset für Hygodem 90

■ Hygopure 90

Wenn der Hygoclave 90 im harten Praxisalltag maximal ausgelastet ist, benötigt er einen starken und zuverlässigen Partner: Die Hygopure 90 verfügt über hohe Kapazitäten und ermöglicht die Entnahme größerer Mengen (mehrere Liter) VE-Wassers auf einmal.



- Umkehrosmoseanlage inkl. Entnahmehahn und Vorratsbehälter
- Mehrere Filterstufen + Hochleistungsmembran mit Serviceventil zur Wirkungsgradüberprüfung
- Einfache Installation durch Schnellverbinder
- Hohe Kapazität
- Entnahme mehrerer Liter VE-Wassers auf einmal möglich
- eco-Modul ermöglicht Wasserersparnis von bis zu 70 %

Unsere Empfehlung: Kartuschenset für Hygopure 90, Membran DF50 für Hygopure 90, Entnahmehahn Edelstahl für Hygopure 90, Leitwertmessgerät HMEC1, Wasserstop-Ventil LD1

**Getestet mit Sterilcontainern aus Aluminium und je zwei Dauerfiltern (je einen im Deckel und in der Bodenwanne). Gewicht ist inkl. Sterilcontainer und zugehöriger Einsätze.

Flächen

Desinfektion und Reinigung Flächen-Desinfektion

■ FD 300 Flächen-Desinfektion

Voll viruzides und alkoholfreies
Konzentrat zur Desinfektion von
Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach DVV/RKI und EN 14476)
- Besonders schnelle Einwirkzeit
- Hohergebieg: bis zu 500 Liter Gebrauchslösung bei 0,5 %
- Gute Materialverträglichkeit

Wirkstoffe: Alkylamine, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 312 Flächen-Desinfektion*

Alkoholfreies Konzentrat zur Desinfektion
von Flächen und Gegenständen



- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS
- Ökonomisch in der Anwendung: bis zu 250 Liter Gebrauchslösung bei 1 %
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Besonders angenehmer Duft

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact


■ FD 370 cleaner Praxisreiniger

Konzentrat zur Reinigung von Flächen
und Gegenständen



- Effektiver Reiniger für Praxisinventar, Geräte, Fußböden
- Keine Neutralisation der Desinfektionswirkung
- Kein Kleben oder Verfärben von gereinigten Flächen in Kombination mit Desinfektionspräparaten
- Hohergebieg: bis zu 250 Liter Gebrauchslösung bei 1 %

Inhaltsstoffe: Nicht-ionische Tenside
Erhältlich als: 2,5 l
Unsere Empfehlung: FD 300, FD 312

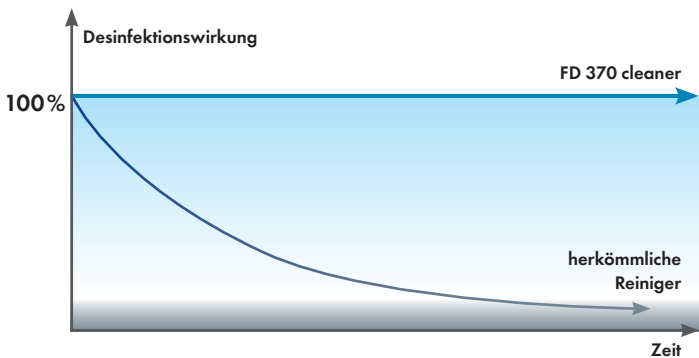

Veränderung der Desinfektionswirkung durch den Einsatz
herkömmlicher ionischer Reiniger und dem nicht-ionischen
Praxisreiniger FD 370 cleaner

i *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Schnelldesinfektion

■ FD 322 Schnelldesinfektion

Schnell wirkende Gebrauchslösung
zur Desinfektion und Reinigung
der Oberflächen von Medizin-
produkten und medizinischem
Inventar



- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, begrenzt viruzid PLUS
- Sehr kurze Einwirkzeit
- Rückstandsfreies Aufdrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit

Wirkstoffe: Alkohole
FD 322 erhältlich als: 750 ml für Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Unsere Empfehlung: Hygowipe Plus, Sprühkopf, 600 ml-Sprühflasche, FD multi wipes, FD multi wipes compact
FD 322 perfume free erhältlich als: 2,5 l, 10 l
Unsere Empfehlung: 600 ml-Sprühflasche, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 333 Schnelldesinfektion

Schnell wirkende Gebrauchslösung
für die Schnelldesinfektion der
Oberflächen von Medizinprodukten
und medizinischem Inventar



- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach EN 14476)
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Frischer Zitronenduft
- Schnelles Aufdrocknen

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 750 ml für Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Unsere Empfehlung: Hygowipe Plus, Sprühkopf, 600 ml-Sprühflasche, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 366 sensitive Desinfektion empfindlicher Oberflächen

Alkoholreduzierte Gebrauchslösung
für die Desinfektion und Reinigung
besonders empfindlicher Oberflächen
von Medizinprodukten



- Bakterizid inkl. Tb, levurozid, begrenzt viruzid & unbehüllte Viren (Noro-Viren)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Bei Behandlungseinheiten ideal in Kombination mit FD 360 Kunstlederreiniger
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: 750 ml für Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Unsere Empfehlung: Hygowipe Plus, Sprühkopf, 600 ml-Sprühflasche, FD multi wipes, FD multi wipes compact

Pflege

■ FD 360 Kunstlederreinigung und -pflege

Reinigungsfluid für porentiefe Reinigung
und Pflege von Kunstlederoberflächen



- Materialschonender Reiniger kombiniert mit Pflegemittel zur dauerhaften Werterhaltung
- Intensive Reinigungswirkung – entfernt Flecken aller Art, Ränder und Verfärbungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Bei Behandlungseinheiten ideal in Kombination mit FD 366 sensitive

Inhaltsstoffe: Spezialtenside, Silikonverbindungen und Pflegeformel auf Avocadoölbasis
Erhältlich als: Set mit 500 ml Sprühflasche und 10 Spezialschwämmen
Unsere Empfehlung: FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes



Flächen-Desinfektionstücher

■ FD 300 top wipes Flächen-Desinfektion

Voll viruzide und alkoholfreie Desinfektions- und Reinigungstücher für Oberflächen von Medizinprodukten



Voll viruzid

- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach EN 14476)
- Besonders schnelle Einwirkzeit
- Praktische Entnahme aus Clipverschlussverpackung
- Griffige Struktur für schnelles Handling

Wirkstoffe: Alkylamine, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: Packung à 50 Tücher
Tuchgröße: 17,5 x 25 cm

■ FD 312 wet wipes Flächen-Desinfektion*

Alkoholfreie Desinfektions- und Reinigungstücher für große Oberflächen



- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- Hohergiebige Flächenbenetzung für bis zu 8 m²
- Tücher in reißfester Wabenstruktur
- Mit frischem Duft

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: Packung à 15 Tücher
Tuchgröße: 22 x 42 cm

■ FD 333 wipes Schnelldesinfektion

Alkoholische gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für kleinere Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach EN 14476)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Rasches Aufdrocknen
- Parfümfrei

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: Spenderdose à 110 Tücher
Tuchgröße: 14 x 22 cm

■ FD 350 Desinfektionstücher

Alkoholische und schnell wirkende Desinfektions- und Reinigungstücher für kleinere Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, begrenzt viruzid PLUS
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Rückstandsfreies Aufdrocknen
- 3 verschiedene Duftnoten: Classic, Flower, Lemon

Wirkstoffe: Alkohole
Erhältlich als: Spenderdose à 110 Tücher
Tuchgröße: 14 x 22 cm



■ FD 366 sensitive wipes

Gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für empfindliche Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid & unbehüllte Viren (Noro-Viren)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Extragroße Tücher
- Parfümfrei

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: Spenderbox à 100 Tücher
Tuchgröße: 20 x 30 cm

■ FD multi wipes

Universelle, trockene Tücher, tränkbar mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln



- Universell einsetzbare Tücher in Kombination mit Flächen-Desinfektionsmitteln
- Fusselfrei und reißfest
- Sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen von Oberflächen
- Sehr ökonomisch

Erhältlich als: Spenderbox à 180 Tücher
Tuchgröße: 20 x 30 cm
Unsere Empfehlung: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 366 sensitive, Wandhalterung für FD multi wipes Box

■ FD multi wipes compact

Extra große, trockene Tücher in handlicher Spenderbox, tränkbar mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln



- Universell einsetzbare Tücher in Kombination mit Flächen-Desinfektionsmitteln
- Fusselfrei und reißfest
- Sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen von Oberflächen
- Kompakte Box, extra große Tücher

Erhältlich als: Spenderbox à 60 Tücher
Tuchgröße: 29 x 30 cm
Unsere Empfehlung: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 366 sensitive

i *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Desinfektion und Reinigung
Hände-Desinfektion

■ HD 410¹⁾ Hände-Desinfektion

Alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion



- Bakterizid inkl. Tb, levurozid, begrenzt viruzid PLUS
- Äußerst schnell: Hygienische Hände-Desinfektion 15 Sekunden/
Chirurgische Hände-Desinfektion 90 Sekunden
- Angenehmes Hautgefühl durch Rückfettung

Wirkstoffe: Alkohole
Erhältlich als: 500 ml, 500 ml für Hygocare Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Unsere Empfehlung: Universalpräparatespender S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, Dosierpumpen

■ HD 412 essential²⁾ Hände-Desinfektion

Besonders hautverträgliches alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion



- Bakterizid inkl. Tb, levurozid, begrenzt viruzid PLUS
- Äußerst sicher: Hygienische Hände-Desinfektion 30 Sekunden/
Chirurgische Hände-Desinfektion 5 Minuten
- Parfüm- und farbstofffrei
- Nicht sensibilisierend, frei von potenziell allergisierenden Zusatzstoffen

Wirkstoffe: Alkohole
Erhältlich als: 500 ml, 500 ml für Hygocare Plus, 1 l, 2,5 l
Unsere Empfehlung: Universalpräparatespender S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, Dosierpumpen

Hände-Reinigung

■ HD 425 Waschlotion

Milde Waschlotion zum Waschen von Haut und Händen



- Alkali- und seifenfrei
- Dermatologisch geprüft – sehr gut verträglich
- Enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen
- Ideales Kombipreparat zur alkoholischen Hände-Desinfektion HD 410 und HD 412 essential

Inhaltsstoffe: Reinigungsaktive Tenside und pflegende Komponenten wie Allantoin
Erhältlich als: 500 ml
Unsere Empfehlung: HD 410, HD 412 essential, HD 440

■ HD 435 Waschlotion

Milde Waschlotion mit hauttypischem pH-Wert zum Erhalt der natürlichen Hautflora



- Alkali- und seifenfrei – erhält den Säureschutzmantel der Haut
- Intensiv reinigend durch ausgewählte waschaktive Komponenten
- Enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen sowie Hautfeuchthaltefaktoren
- Ideales Kombipreparat zur alkoholischen Hände-Desinfektion HD 410 und HD 412 essential

Inhaltsstoffe: Reinigungsaktive Tenside, antimikrobielle Substanzen sowie Allantoin
Erhältlich als: 500 ml, 1 l, 2,5 l
Unsere Empfehlung: Universalpräparatespender S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, Dosierpumpen, HD 410, HD 412 essential, HD 440

Pflege

■ HD 440 Pflegelotion

Lotion zur Pflege beanspruchter und empfindlicher Haut



- Schützt, pflegt und beugt Entzündungen vor
- Verhindert das Austrocknen der Haut
- Bewährte Inhaltsstoffe erhalten die Geschmeidigkeit der Hände
- Nicht fettend – schnelles Einziehen in die Haut

Inhaltsstoffe: Pflegenden Öle, Hamamelisextrakt, Allantoin
Erhältlich als: 500 ml
Unsere Empfehlung: Universalpräparatespender S 400, L 400, Dosierpumpe, HD 410, HD 412 essential, HD 425, HD 435

Spendersysteme

■ Universal-Präparatespender Touchless

Batteriebetriebener Sensorspender zur hand-berührungsfreien, hygienischen Applikation von Händepreparaten



- Optimale Händehygiene durch berührungslose Bedienung
- Batteriebetrieb mit Batteriestandsanzeige durch akustisches Signal zum Batteriewechsel
- Hoher Hygienestandard durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Autoklavierbare Edelstahlpumpe oder Einwegpumpe

Maße (BxHxT): T 1000/T 400: 9,2x33,0x21,0 cm
Erhältlich als: T 400 für 500 ml-Flasche, T 1000 für 1 l-Flasche
Unsere Empfehlung: HD 410, HD 412 essential, HD 435 in der 500 ml-Flasche oder 1 l-Flasche, HD 440 in der 500 ml-Flasche, Schalenhalter, Tischständer, Einwegpumpen

■ Universal-Präparatespender

Universal-Präparatespender zur Wandmontage für die Applikation von Händepreparaten



- Äußerst bedienerfreundlich
- Erhältlich mit kurzem (S) oder langem (L) Armhebel
- Langlebige Aluminium- und Edelstahlausführung
- Autoklavierbare Pumpe oder Einwegpumpe

Maße (BxHxT): S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, Armhebellänge: S: 16 cm, L: 21,5 cm/L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, Armhebellänge: 22,5 cm
Erhältlich als: S 400 und L 400 für 500 ml-Flasche, L 1000 für 1 l-Flasche
Unsere Empfehlung: HD 410, HD 412 essential, HD 435 in der 500 ml-Flasche oder 1 l-Flasche, HD 440 in der 500 ml-Flasche, Einwegpumpen

¹⁾ Zusammensetzung HD 410: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoffe 2-Propanol 47 g, 1-Propanol 26 g. Sonstige Bestandteile: Poly(oxethyl)-6-glycerol(mono, di) alkanolat [C₈-C₁₀], Farbstoff E 131, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Gegenanzeigen: HD 410 ist nicht geeignet für die Desinfektion von Schleimhäuten und zur Anwendung auf der verletzten Haut. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf HD 410 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie z.B. Hauttrockenheit kommen. Hinweise: Bei Raumtemperatur lagern. Vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit schützen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim, Mitvertrieb: DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen.

²⁾ Zusammensetzung HD 412 essential: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Gegenanzeigen: HD 412 essential ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf HD 412 essential nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit HD 412 essential können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Hinweise: Gut verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim, Mitvertrieb: DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Gewissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Desinfektion und Reinigung Sauganlage und Mundspülbecken

■ Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies Flüssigkonzentrat für die gleichzeitige Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider



- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, begrenzt viruzid PLUS
- Löst Biofilm und beugt Verschattung durch Blut und Proteine vor
- Die Lösung für kontaminierte Sauganlagen – gewährt sicheren Infektionsschutz
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen

Erhältlich als: 2,5 l

Unsere Empfehlung: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ Orotol® ultra Sauganlagen-Desinfektion

Pulverförmiges Konzentrat für die gleichzeitige Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider



- Bakterizid inkl. Tb, sporizid (gegen Clostridium difficile), fungizid, viruzid (geprüft nach DVV/RKI und EN 14476)
- Löst Biofilm und beugt Verschattung durch Blut und Proteine vor
- Geringe Anwendungskonzentration (1 %)
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen

Wirkstoffe: Natriumcarbonat-Peroxohydrat

Erhältlich als: 500 g-Beutel

Unsere Empfehlung: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art



- Löst Verkrustungen aus Kalk, Prophylaxepulvern oder Prophylaxe Pearl-Produkten
- Intensivste Reinigungswirkung gegen Ablagerungen und Verschattungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Ideal in Kombination mit Orotol® plus

Inhaltsstoffe: Organische und anorganische Säuren, schaumfreie Tenside

Erhältlich als: 2,5 l

Unsere Empfehlung: OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

■ MD 550 Mundspülbecken-Reiniger

Schaumfreie, gebrauchsfertige Lösung zur intensiven und rückstandslosen Reinigung von Mundspülbecken



- Problemloses Entfernen von Rückständen wie Kalk, Blut oder Plaquefärbemitteln
- Gleichzeitige Reinigung, Desodorierung und Pflege von Mundspülbecken
- Ohne Scheuerkomponenten – kein Zerkratzen des Mundspülbeckens
- Antimikrobiell – wirksam gegen Bakterien und Hefepilze

Wirkstoffe: Alkohole

Erhältlich als: 750 ml

Unsere Empfehlung: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

■ OroCup Pflegesystem

Anwenderfreundliches, geschlossenes Pflegesystem zum Desinfizieren und Reinigen von Sauganlagen und Amalgamabscheidern



- Erzeugt ein Luft-Wasser-Gemisch zur optimalen Benetzung und effektiven Reinigung des Saugsystems
- Rationelles Arbeiten – ein System zum Ansetzen und Durchsaugen der Gebrauchslösungen
- Anschlussadapter für alle Saugschläuche

Erhältlich als: 2 Liter Pflegesystem

Unsere Empfehlung: Orotol® plus, MD 555 cleaner



Abformungen und zahntechnische Arbeiten

■ MD 530 Zemententferner und Prothesenreiniger

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Zement, Zahnstein, Raucherflecken, Oxidschichten etc.



- Intensive Reinigungswirkung und rückstandsloses Entfernen säurelöslicher Beläge
- Direkt anwendbar bei bester Materialverträglichkeit
- Besonders schnell und effektiv durch Spezialrezeptur
- Enthält Korrosionsinhibitoren
- Für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet

Inhaltsstoffe: Anorganische Säuren, Tenside

Erhältlich als: 2,5 l

Unsere Empfehlung: Hygobox, Hygosonic

■ MD 535 Gipsentferner

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Gips und Alginaten von Abdrucklöffeln und anderen Hilfsmitteln



- Neutraler Spezialreiniger mit besonders schneller Wirkung
- Intensive Reinigungskraft für rückstandsloses Entfernen von Gips und Alginat
- Mit Aktivitätsindikator
- Für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet

Inhaltsstoffe: Alkalische Reinigungskomponenten und Komplexbildner

Erhältlich als: 2,5 l

Unsere Empfehlung: Hygobox, Hygosonic

■ MD 520 Abdruck-Desinfektion

Alkoholfreie Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten etc.



- Bakterizid inkl. Tb, levurozid, viruzid (geprüft nach EN 14476)
- Anwendung für Alginat, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide etc.
- Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch effektive Reinigungswirkung
- Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen, Glutardialdehyd

Erhältlich als: 2,5 l, 10 l

Unsere Empfehlung: Desinfektionsdose, Hygobox, Hygojet

Gerät

■ Hygojet

Desinfektions- und Reinigungsschleuse für Abformungen und prothetische Arbeiten



- Das geschlossene System verhindert Kreuzinfektionen
- Sparsam im Verbrauch – mit nur 10 ml MD 520 pro Abformung
- Äußerst effektiv – bei 6 Abformungen innerhalb von 12 Minuten
- Geprüftes Desinfektionsverfahren – durch Gutachten belegt

Maße (BxHxT): 56 x 34 x 32 cm

Unsere Empfehlung: MD 520

Wirkungsspektren und Anwendungen

	Desinfektion	Reinigung	aldehydfrei	biologisch abbaubar	VAH-gelistet	IHO Viruzidie-Liste	geprüft gemäß EU-Normen	4-Felder-Test gemäß VAH/EN 16615	bakterizid	tuberkulozid	levurozid	fungizid	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid PLUS	viruzid	Anwendung	Einwirkzeit nach VAH in Min.	Einwirkzeit in Min. im Ultraschallbad	Standzeit in Tagen
Instrumente																			
ID 212 Instrumenten-Desinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	■	2%	5	2 ¹⁰	7
ID 212 forte Instrumenten-Desinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	■	2%	5/60 ⁷	2 ⁸	7
ID 213 Instrumenten-Desinfektion ¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	■	2%	5/60 ⁷	2 ⁹	14
ID 215 Enzymatischer Instrumenten-Reiniger	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1%/2%	30/15	15/1	
ID 220 Bohrer-Desinfektion ^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	unverdünnt	1 ⁷	0,5 ⁷	7
Flächen																			
FD 300 Flächen-Desinfektion ^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	1%/2%	15 ¹⁰ /5		
FD 312 Flächen-Desinfektion ¹	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	■	1%	15		
FD 370 cleaner Praxisreiniger	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1%/2%			
FD 322 Schnelldesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	unverdünnt	1 ⁷		
FD 333 Schnelldesinfektion ¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	unverdünnt	1 ⁷		
FD 360 Kunstlederreinigung und -pflege	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	unverdünnt			
FD 366 sensitive Desinfektion empfindlicher Oberflächen	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	■	unverdünnt	1 ¹¹		
FD 300 top wipes Flächen-Desinfektion ¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	unverdünnt	2 ¹⁰		
FD 312 wet wipes Flächen-Desinfektion ¹	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	■	unverdünnt	15		
FD 333 wipes Schnelldesinfektion ¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	unverdünnt	1 ¹²		
FD 350 Desinfektionstücher	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	unverdünnt	1 ⁷		
FD 366 sensitive wipes Desinfektion empfindlicher Oberflächen	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	■	unverdünnt	1 ¹¹		
Haut und Hände																			
HD 410 Hände-Desinfektion ^{1, 2, 3}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	■	unverdünnt	0,25/1,5 ^{12, 13}		
HD 412 essential Hände-Desinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	■	unverdünnt	0,5/5 ^{12, 13}		
HD 425 Waschlotion ⁴	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	unverdünnt			
HD 435 Waschlotion ⁴	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	unverdünnt			
HD 440 Pflegelotion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	unverdünnt			
Spezialbereiche																			
Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	2%	5/60 ⁷		
Orotol® ultra Sauganlagen-Desinfektion ^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	1%	5		
MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5%	30-120		
MD 550 Mundspülbecken-Reiniger	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	■	■	unverdünnt	ca. 5		
MD 520 Abdruck-Desinfektion ¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁵	■ ⁵	■	■	■	■	unverdünnt	5 ⁷ /10 ¹⁴		7
MD 530 Zemententferner/Prothesenreiniger	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	unverdünnt	max. 10	max. 10	
MD 535 Gipsentferner	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	unverdünnt	n. Bed.	n. Bed.	

¹Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. ²rückfettend ³RKI-gelistet ⁴hauttypischer pH-Wert ⁵hohe Belastung ⁶geringe Belastung ⁷inkl. Tb-Bakterien

⁸für Tb-Bakterien 4%/30 Min. ⁹für Tb-Bakterien 2%/30 Min. ¹⁰für Tb-Bakterien 60 Min. ¹¹für Tb-Bakterien 2 Min. ¹²für Tb-Bakterien 30 Sek. ¹³hygienische Händedesinfektion/Chirurgische Händedesinfektion ¹⁴im Hygojet ¹⁵geprüft nach DVV/RKI ¹⁶geprüft nach EN 14476